

● 圖片為無座椅式樣




無座椅型號
GK6GVL9413YL
有座椅型號
GK6GVL9411YL

● 規格一覽表

連接部分	配管接頭	外螺紋螺絲 G1/2 (水閥接口)
	使用壓力範圍	100~600 KPa (0.1~0.6 MPa)
	耐壓性能	1.75 MPa 1分鐘
操作部分	重量	約 18kg
	調溫手把	(冷水-約 47 °C)
	淋浴切換手把	淋浴桿淋浴/手持淋浴/止水和水流量調節
電源	座椅	可動摺疊收放式
	無需使用	
基本性能	淋浴水流量	淋浴桿淋浴/腰部噴嘴 9.0/min (100 KPa時) 手持淋浴 8.0/min (100 KPa時)
	調溫性能	安全按鈕停止位置 水溫約 42 °C 防止流出高溫熱水功能 水溫約在 47 °C 以下
材質	座椅、外罩、噴嘴	樹脂
	淋浴桿	金屬
	手持淋浴	樹脂

尺寸圖

(尺寸單位:mm)

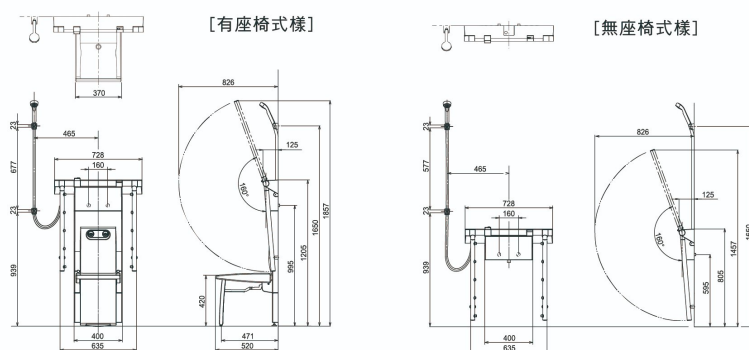

● 商品購買相關疑問請洽經銷商

顧客商談服務專線

☎ 0800-098800

☎ 02-412-8222



台灣松下銷售股份有限公司

進口/銷售

● 本型錄商品圖外觀、顏色僅供參考，請以實物為準。

日本原裝進口

健康浴座



方便洗澡椅使用者讓看護人員輕鬆直接推入淋浴使用。


推薦搭配洗澡輪椅一同使用，能夠減輕看護者的負擔，並讓使用者以坐姿輕鬆淋浴。



不需要動用到大規模的複雜改裝工程。同時可以達到省水效果。

使用水量與一般蓮蓬頭用水量相當，但與浴缸泡澡時的用水量相比，即有大幅度的省水效果。

坐式淋浴器使用的水量

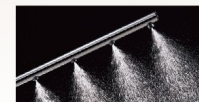

預估用水量約9.0 L/分

洗澡一回使用的水量




約45 L
約5分鐘使用的場合

Point 01 水霧狀水滴包覆全身

忙碌之餘，雖然沒有時間泡澡，使用坐式淋浴器同樣能讓身體暖和起來。


● 坐式淋浴器與一般手持蓮蓬頭淋浴範圍比較

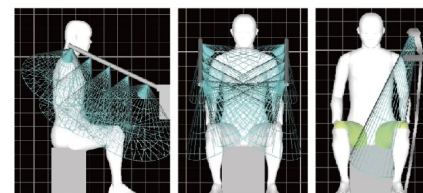

Point 02 大範圍包覆全身，讓身體溫暖

與一般手持蓮蓬頭淋浴相比，使用坐式淋浴器能同時以較大範圍全身淋浴。


● 坐式淋浴器能讓身體暖和起來

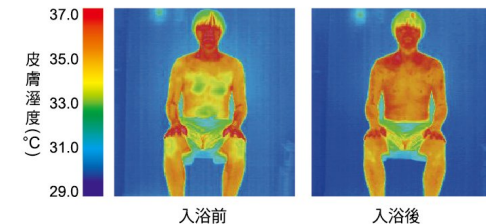

Point 03 讓長輩安心舒適的沐浴

適溫的水霧噴灑可達到和泡澡一樣的效果，卻沒有泡澡容易產生的危險，例如不易導致中風或心臟病的發生，對高血壓的人也不會造成負擔。心跳上昇數約為泡澡的1/2而已。

持續讓溫暖乾淨的水霧快速包覆全身，短時間內就會讓身體暖和。

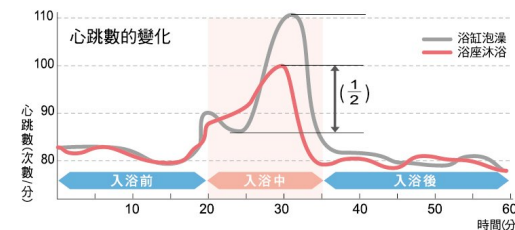

全身泡在熱水缸裡，浴缸的水壓及高溫的水是讓血壓上昇及心跳加速的主要原因。



出浴缸時溫度及血壓快速下降，容易讓人發生貧血暈眩的現象，若不小心倒下會有溺斃及其它浴室意外的狀況發生